

Hydra Jagwire™

Fil-guide

FIL-GUIDE HYDRA JAGWIRE™ 035" (0.89mm)

Référence	Description	Longueur (cm)	Extrémité Dream Tip	Corps	Diamètre (in) / (mm)
M00556001	Hydra Jagwire ST	260	Droite		0.035 / 0.89
M00556011	Hydra Jagwire ANG	260	Courbe		0.035 / 0.89
M00556021	Hydra Jagwire ST SS	260	Droite	Rigide	0.035 / 0.89
M00556031	Hydra Jagwire ANG SS	260	Courbe	Rigide	0.035 / 0.89
M00556041	Hydra Jagwire ST	450	Droite		0.035 / 0.89
M00556051	Hydra Jagwire ANG	450	Courbe		0.035 / 0.89
M00556061	Hydra Jagwire ST SS	450	Droite	Rigide	0.035 / 0.89
M00556071	Hydra Jagwire ANG SS	450	Courbe	Rigide	0.035 / 0.89

Conditionnement: 2 par boîte

Centre de distribution Européen – Les Pays-Bas
T: +31 45 54 67 700 F: +31 45 54 67 800

Direction Européenne – Paris
T: +33 1 57 66 80 00 F: +33 1 57 66 84 99

Afrique du Sud
T: +27 11 840 8600 F: +27 11 463 6077

Allemagne (Appel gratuit)
T: 08000 7233 00 F: 08000 7233 19

Argentine (Appel gratuit)
T: 0800 555 2678 F: +5411 4896 8517

Asie du Sud Est – Malaisie
T: +60 3 2283 3813 F: +60 3 2284 3813

Asie du Sud Est – Philippines
T: +63 2 687 6994 F: +63 2 687 3047

Asie du Sud Est – Singapour
T: +65 6418 8888 F: +65 6418 8899

Asie du Sud Est – Thaïlande
T: +66 2 6380 100 F: +66 2 6380 400

Australie/ Nouvelle Zélande
T: +61 2 9363 6100 F: +61 2 9330 1404

Autriche
T: +43 1 60 810 F: +43 1 60 810 60

Belgique (Appel gratuit)
T: 0800 94 494 F: 0800 93 343

Bésil
T: +55 11 5502 8500 F: +55 11 5103 2212

Canada
T: +1 888 359 9691 F: +1 888 575 7396

Chili
T: +562 445 4904 F: +562 445 4915

Chine – Beijing
T: +86 10 8525 1588 F: +86 10 8525 1588

Chine – Guangzhou
T: +86 20 8767 9791 F: +86 20 8767 9789

Chine – Shanghai
T: +86 21 6141 5959 F: +86 21 6141 5900

Colombie
T: +57 1 629 5045 F: +57 1 612 4761

Corée
T: +82 2 3476 2121 F: +82 2 3476 1776

Danemark (Appel gratuit)
T: 80 30 80 02 F: 80 30 80 05

Espagne – Barcelone
T: +34 93 444 72 00 F: +34 93 405 90 45

Espagne – Madrid
T: +34 91 319 50 03 F: +34 91 319 50 03

Europe du Sud Est
T: +30 210 9542 300 F: +30 210 9542 310

Finlande
T: +358 20 762 8882 F: +358 20 762 8883

France
T: +33 1 39 30 49 00 F: +33 1 39 30 49 01

Grande Bretagne (Appel gratuit)
T: 0844 800 4512 F: 0844 800 4513

Grèce
T: +30 210 9542 300 F: +30 210 9542 310

Hong Kong
T: +852 2960 7100 F: +852 2563 5276

Hongrie
T: +36 1 456 30 40 F: +36 1 456 30 41

Inde – Bangalore
T: +91 80 2212 4928/9 F: +91 80 2207 5153

Inde – Chennai
T: +91 44 2220 1879 F: +91 44 2220 0716

Inde – Delhi
T: +91 11 4243 2222 F: +91 11 2610 0808

Inde – Mumbai
T: +91 22 4030 9165 F: +91 22 4040 9199

Irlande (Appel gratuit)
T: 1800 882 969 F: 1800 882 968

Italie
T: +39 010 60 60 1 F: +39 010 60 60 200

Les Pays-Bas
T: +31 30 602 55 44 F: +31 30 602 55 05

Mexique
T: +52 55 5687 63 90 F: +52 55 5687 62 28

Moyen-Orient/Golfe Persique/Afrique du Nord
T: +961 1 805 282 F: +961 1 805 445

Norvège (Appel gratuit)
T: 800 104 04 F: 800 101 90

Pologne
T: +48 22 435 14 14 F: +48 22 435 14 10

Portugal
T: +351 1 381 25 40 F: +351 21 381 25 58

République Tchèque
T: +420 296 331 901 F: +420 296 331 935

Suède
T: +46 42 25 69 00 F: +46 42 25 69 69

Suisse
T: +41 32 626 57 00 F: +41 32 626 57 01

Taiwan
T: +886 2 2747 7278 F: +886 2 2747 7270

Turquie – Istanbul
T: +90 216 464 36 66 F: +90 216 464 36 67

Uruguay
T: +59 82 900 6212 F: +59 82 900 6212

Venezuela
T: +56 212 959 6275 F: +56 212 959 5328

Toutes les marques déposées mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. AVERTISSEMENT : Conformément à la législation, ce dispositif ne peut être vendu que sous prescription médicale. Les indications, contre-indications, mises en garde et mode d'emploi figurent sur la notice livrée avec chaque dispositif. Informations à n'utiliser que dans les pays avec enregistrements produits des autorités sanitaires applicables. PSST IC 1826 Imprimé au UK par Gosling. *L'avenir dès maintenant.

Hydra Jagwire™

Fil-guide

Boston
Scientific



RX Biliary System™
**A difference
you can feel.™**

Boston
Scientific

Delivering what's next.™*

www.bostonscientific.com
www.bostonscientific-international.com

RCS Nanterre B420 668 420
© 2008 Boston Scientific Corporation
ou ses filiales. Tous droits réservés.
DINEND2109FB

RX Biliary System™

A difference you can feel.™


L'endoscope vous indique le chemin, mais c'est votre toucher qui vous amène où vous devez aller. Le dispositif qui constitue le Système RX Biliary a été développé pour faciliter l'accès et le contrôle avec une sensation de réactivité du dispositif qui est réellement...une différence que vous pouvez sentir.

Au fil des ans, Boston Scientific a gagné la confiance et la fidélité des clients du monde entier ayant adopté le système RX Biliary pour une utilisation quotidienne. Notre héritage de succès dans le développement des dispositifs biliaires RX nous a permis de modifier le paysage des procédures de CPRE. En innovant et en sophistiquant nos produits, nous avons mis la facilité de contrôle et d'accès à la portée de vos mains.

DEUX EXTREMITES DIFFERENTES SUR UN SEUL FIL-GUIDE

La technologie de l'extrémité du fil-guide est destinée à améliorer l'efficacité de la procédure

- ◆ L'extrémité hydrophile de 10 cm Dream Tip™ End est conçue pour permettre un accès souple et en douceur et une excellente sensation tactile. Permet de passer à l'extrémité hydrophile de 5 cm pour répondre aux besoins d'une extrémité plus ferme pendant la procédure
- ◆ L'extrémité de 5 cm est similaire en termes de performances au fil-guide Jagwire™
- ◆ Fils-guides de 260 cm et 450 cm pour répondre à la préférence du médecin pour la technique sur fil court ou la technique classique sur fil long
- ◆ Le fil-guide peut être laissé en place pendant la sphinctérotomie
- ◆ Choix d'extrémités Dream Tip End courbes ou droites

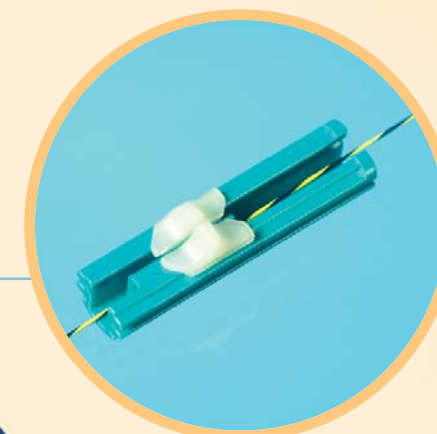


REACTIVITE TACTILE

Le dispositif de rotation à chargement latéral est conçu pour une manipulation efficace de l'extrémité du fil-guide

- ◆ Facilite la cannulation profonde du canal cholédoque
- ◆ Le revêtement Endoglide™ facilite la progression en douceur et améliore la sensation tactile
- ◆ Le corps en nitinol résistant aux plicatures est conçu pour optimiser le contrôle du fil et les possibilités de manipulation


Hydra Jagwire™ Fil-guide

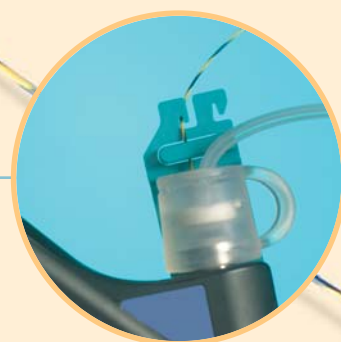


DISPOSITIF DE VERROUILLAGE RX

Le fil-guide se verrouille en place pour maintenir l'accès

- ◆ Le fil-guide peut être verrouillé et déverrouillé à tout moment pendant la procédure
- ◆ Facilite l'échange de dispositif, l'injection du produit de contraste et le traitement biliaire

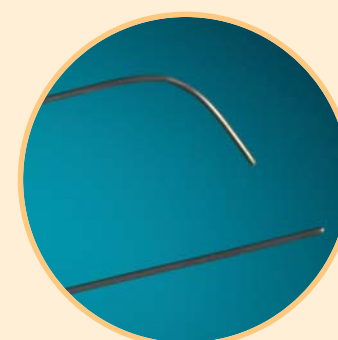

Choix d'extrémités Dream Tip End courbes ou droites

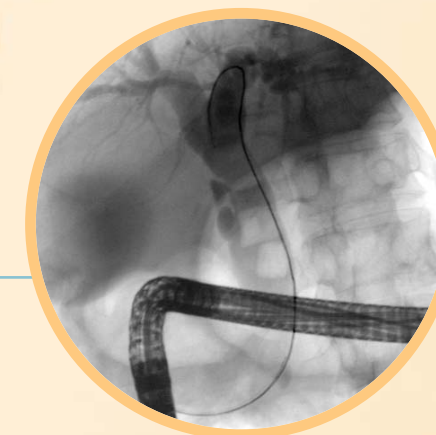

UNE VISUALISATION EXCELLENTE

Le fil-guide Hydra Jagwire est dessiné de manière à former une boucle en alpha pour faciliter l'accès au canal

- ◆ Les repères de déplacement rayés sont destinés à indiquer le positionnement du fil pendant sa progression et l'échange de dispositif
- ◆ Les repères radio-opaques à 10 cm et 15 cm facilitent une mesure précise de la sténose
- ◆ Les extrémités remplies en tungstène facilitent la visualisation radioscopique pour aider à confirmer l'accès pendant l'échange de dispositif

Images aimablement prêtées par Thomas Kowalski, MD, Thomas Jefferson University Hospital, Philadelphia, Pennsylvania